



ΤΕΡΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ

Πιάσιμο στην πλάτη, πιάσιμο στο σβέρο, πόνος στη μέση, πόνος στους μύς, αϋπνίες ή και δυσκοιλιότητα, πόνος κατά την διάρκεια της περιόδου. ΟΧΙ ΠΙΑ

Όλα αυτά τα συμπτώματα οφείλονται στην μη ομαλή κυκλοφορία του αίματος και όχι στην ακαμψία των μυών. Λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής έχουμε απομακρυνθεί από την επίδραση του φυσικού μαγνητικού πεδίου της γης. Τοποθετώντας τα KORICLEAN στην περιοχή του πόνου, η μαγνητική ισχύ του αποκαθιστά την ενέργεια του σώματός μας, κανονίζει το ρυθμό του σώματος, κάνει το αίμα να κυκλοφορεί περισσότερο ομαλά και κατά συνέπεια μαλακώνει τα πιασίματα και μειώνει τους πόνους του σώματος.

Μαγνητική ισχύ περισσότερων των 700 γκάους ενισχύουν / επηρεάζουν την περιοχή όπου το KORICLEAN είναι κολλημένο.

Αυτή η μαγνητική ισχύ μπορεί να μαλακώσει τους πόνους από κάθε είδους «πιάσιμο» και να διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος. Το KORICLEAN βάση της μαγνητικής του ισχύος λειτουργεί σαν θεραπευτική συσκευή.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τοποθετήστε τα KORICLEAN στην ακριβή θέση που παρουσιάζεται το πιάσιμο, στην πλάτη, σβέρο, μέση, αλλά και βάση των αναπνευστικών σχεδιασμένων που παρέχονται. Πριν το τοποθετήσετε παρακαλούμε καθαρίστε τοπικά την περιοχή για να παρατείνεται την διάρκεια εφαρμογής του λευκοπλάστ. Αν και τα αποτελέσματα της χρήσης του θα φανούν στις πρώτες 48 ώρες (ανάλογα με την περίπτωση) ενδείκνυται η παραμονή τους για περίπου 5 ημέρες, ώστε ο οργανισμός να συνηθίσει στην σωστή λειτουργία.

Ο μαγνήτης δε σκουριάζει γι' αυτό το λόγο εσείς μπορείτε να κάνετε μπάνιο (στο σπίτι ή τη θάλασσα) χωρίς να βγάλετε το KORICLEAN.

Σε άτομα που παρουσιάζουν αλλεργικά συμπτώματα πιθανώς να ενδείκνυται αντικατάσταση του λευκοπλάστ του KORICLEAN. Εάν το δέρμα σας σκάζει ισχυρά ή έχει φαγούρα, παρακαλούμε αφαιρέστε το τοποθετώντας άλλο KORICLEAN.

**Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ
ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ**

KORICLEAN

Διεγείρει άμεσα την κυκλοφορία του αίματος.
Σταματά τους πόνους.
Χρήση εξωτερική απόλυτα ακίνδυνη
Εγκεκριμένος από το Ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας.




**ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ
ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ**

AMF ELECTRONICS

Αρχιμήδους 33-35, 145 69 Άνοιξη Αττικής
Τηλ.: +30 210 6229298, Fax: +30 210 8130248
e-mail: info@amfelectronics.gr
www.amfelectronics.gr

ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΙΚΛΙΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

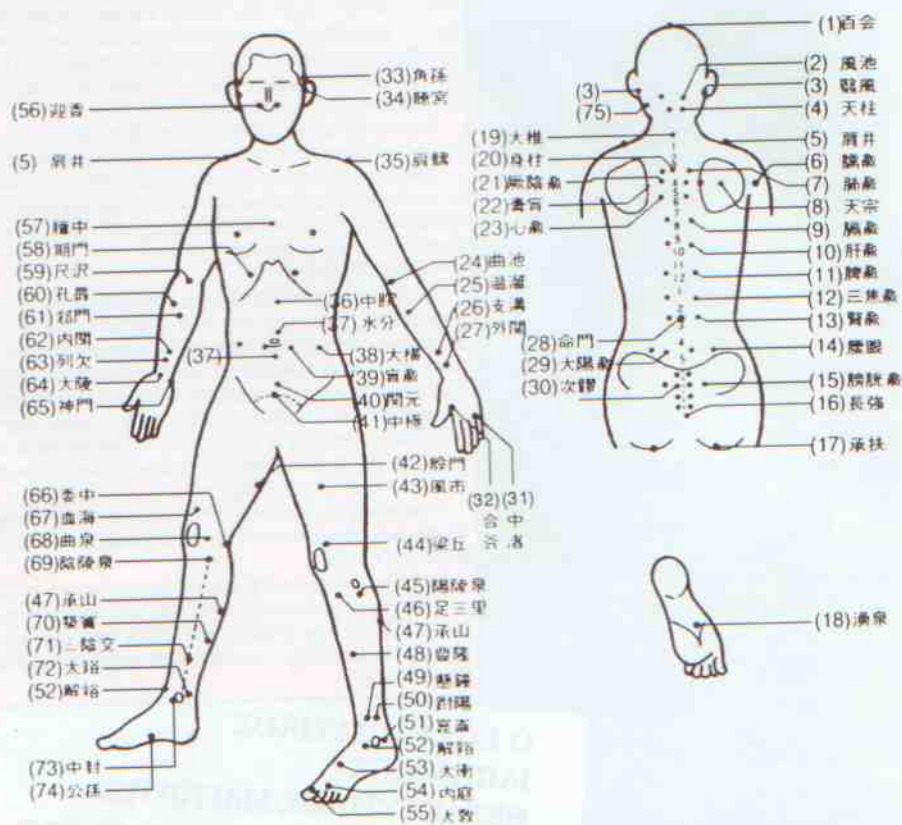

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

- | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1. ΠΙΑΣΙΜΟ ΠΛΑΤΗΣ | No (5) (8) (19) (22) (24) | 12. ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ | No (26) (29) (38) (65) |
| 2. ΠΙΑΣΙΜΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ | No (12) (13) (14) (29) (30) | 13. ΑΝΑΙΜΙΑ | No (9) (10) (12) (19) (21) (23) |
| 3. ΜΟΥΔΙΑΣΜΑ ΧΕΡΙΟΥ | No (5) (6) (24) (27) (32) (64) | 14. ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ | No (2)(4)(5)(33) |
| 4. ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΣΠΛΑΧΝΩΝ | No (37) (39) (44) (46) | 15. ΓΙΑ ΒΑΘΥ ΥΠΝΟ | No (57) (12) (11) |
| 5. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΥ | No (44) (45) (46) (66) (67) (68) (69) | | |
| 6. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ | No (50) (51) (52) (72) (73) | | |
| 7. ΚΑΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ | No (75) (3) (4) | | |
| 8. ΚΑΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ | No (46) (47) (49) (70) (72) | | |
| 9. ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | No (37) (39) | | |
| 10. ΠΟΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥΣ | No (51) (52) (72) (73) | | |
| 11. ΠΙΑΣΙΜΟ ΣΤΟ ΣΒΕΡΚΟ & ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ | No (2) (4) (5) | | |



**Stiffness-relieving
Circulation-improving.**
for stiffness at shoulder,
neck and low back.

ΠΑΡΑΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΕΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ
ΕΠΕΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
#ΚΟΡΙΚΛΕΑΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ
#ΜΥΣΤΕΡΙΟΣΤΟΙΧΕ &
ΣΕΙΜΩΤΕΥΣΗ
Αγροκτήματα 30-00
Αρσινόη Αρσινόη
Τηλ. +30210648323766
Fax: 6222088

ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
KORICLEAN
ΣΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΥΧΛΟΠΟΙΝΗ
ΤΟ ΣΑΜΑΡΙΟ
1 ΣΑΜΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Stiffness-relieving, Circulation-improving.
for stiffness at shoulder, neck and low back.

KORICLEAN

stiffness-relieving and circulation-improving.
<for magnetotherapy>

Japanese Government Approval No.558 062